

馬偕醫院診間現場安裝手冊

PS: 請將程式放置 D 槽並請資訊室開啟最高權限(Administrator 供我們安裝軟體)

台北資訊室窗口:(02)2543-3535 #2477(值班人員)

淡水資訊室窗口:(02)2809-4661 #2204(值班人員)

一、框體螢幕位置設定

1. 診間如為 15 吋螢幕，將診間電腦主畫面設定為第二螢幕將螢幕解析度設定為 1024X768，其餘診間依此類推

```
[ClipCursor]
Left=0
Top=0
Right=1024
Bottom=768
Interval=500
```

2. 診間如為 17、19 吋螢幕，診間電腦第二螢幕為主畫面，將螢幕解析度設定為 1280X1024，其餘診間依此類推

```
[ClipCursor]
Left=0
Top=0
Right=1280
Bottom=1024
Interval=500
```

(預放程式跳過下圖設定)



3. 診間 PC 為第 2 顆螢幕，主畫面螢幕解析度為 1280X1024，因框體接 HDMI 線，故會自動判別為第一顆螢幕，故框體顯示為第一顆螢幕，改為**直式**拉到左上角，將第 2 顆螢幕螢幕解析度為 720X1280，再點確定即可。

*如在台北分院安裝則將台北馬偕資料夾內 Richbank 資料夾放置診間 D 槽完成後，再執行診間電腦 D:\richbank\RBAP\RunME.bat

*如在淡水分院安裝則將淡水馬偕資料夾內 Richbank 資料夾放置診間 D 槽完成後，再執行診間電腦 D:\richbank\RBAP\RunME.bat

執行完後會自動完成安裝後自動跳出記事本(Richbank_ClipCursor.ini)


4. 如為正式安裝**(有框體)**作法如下:

D:\richbank\ update\ClientUpdate-NO.ini 修改成 ClientUpdate.ini

如為預放程式**(無框體)**作法如下:

將 D:\richbank\ update\ClientUpdate.ini 修改成 ClientUpdate-NO.ini

因為先預放程式如此重新開機後則就不會自動執行程式

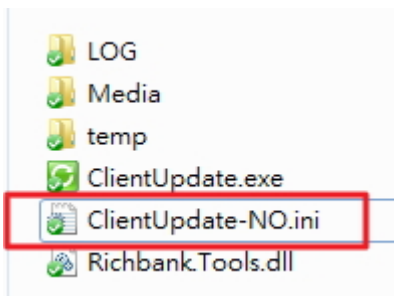

二、元件及驅動安裝

1. 安裝關閉氣泡

1-1. 會自動彈出登陸編輯程式，點選【是】



1-2. 再點選【確定】




2. 安裝讀卡機驅動

2-1. 自動彈跳出讀卡機驅動程式安裝


2-2. 點選下一步




2-3. 點選下一步

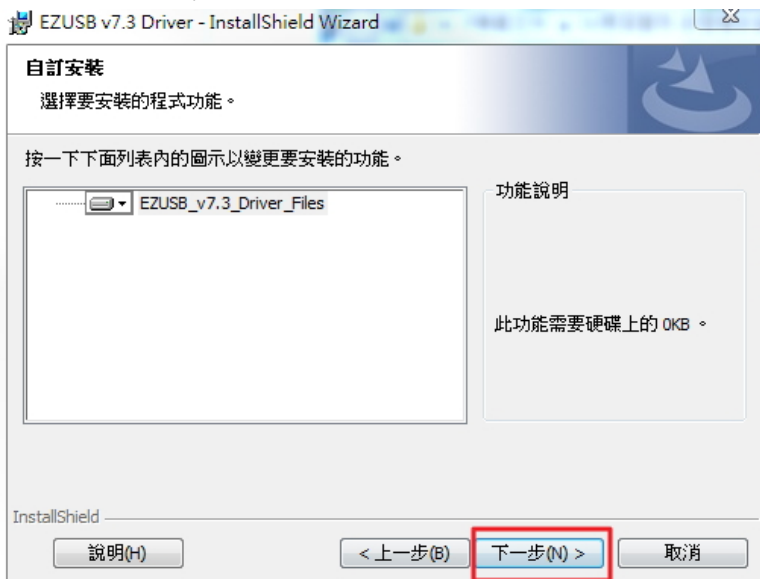

2-4. 點選安裝，再點選完成後即完成安裝

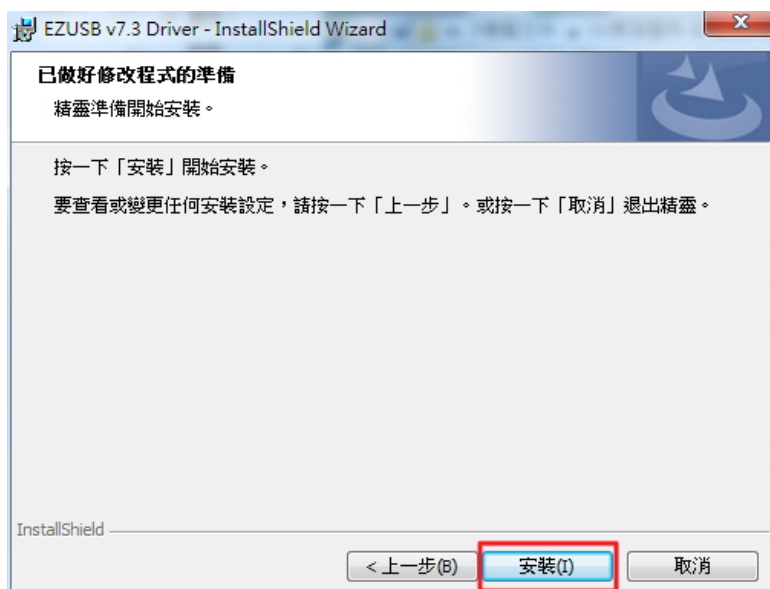

2-5. 點選套用，再點選取消及完成安裝

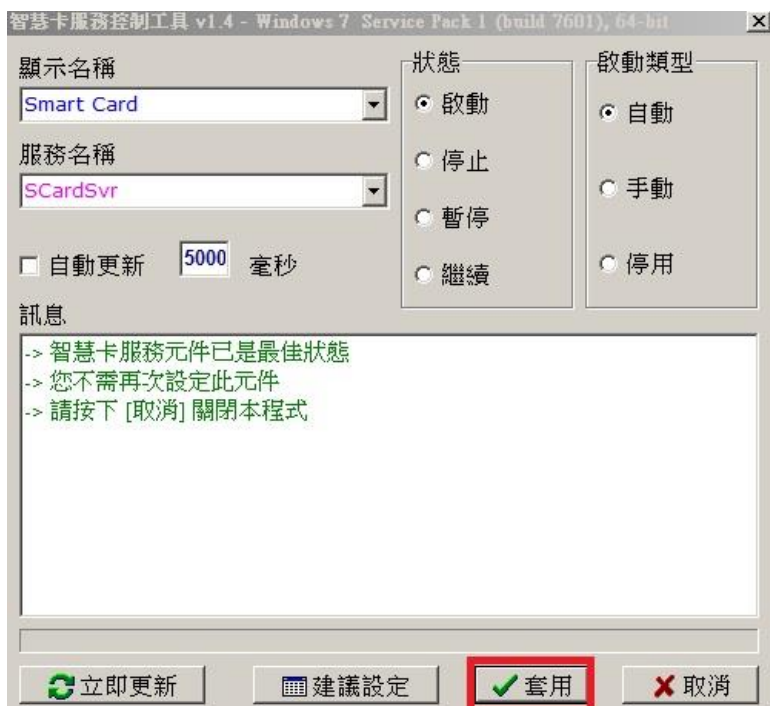

三、DS2 Player 的 config 變更


3-1. 會自動起 rbMAgent.exe 和 Richbank.Update.exe

3-2. 會自動跳出 config.bat


3-3. 依照所在院區設定中心端 IP

台北馬偕中心端 IP:10.13.66.30

淡水馬偕中心端 IP:10.2.16.104

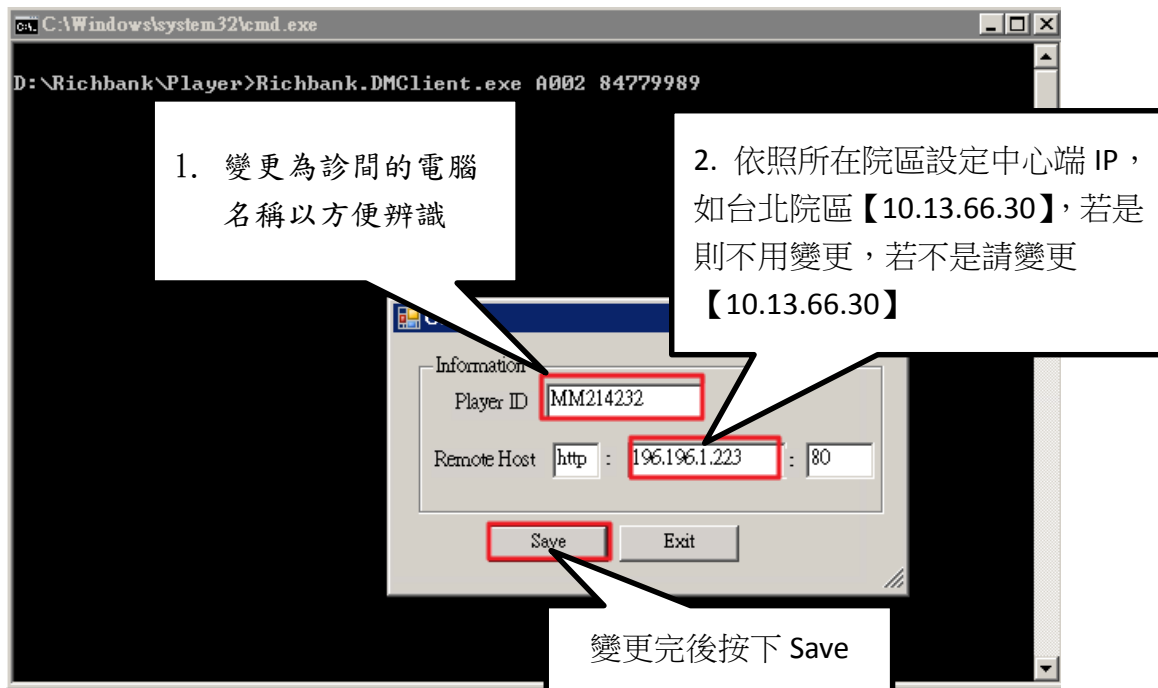

3-4. 將 D:\richbank\SYSCONFIGSTD.ini，第三行 RequestIP=10.13.66.30 設定為所在院區設定中心端 IP

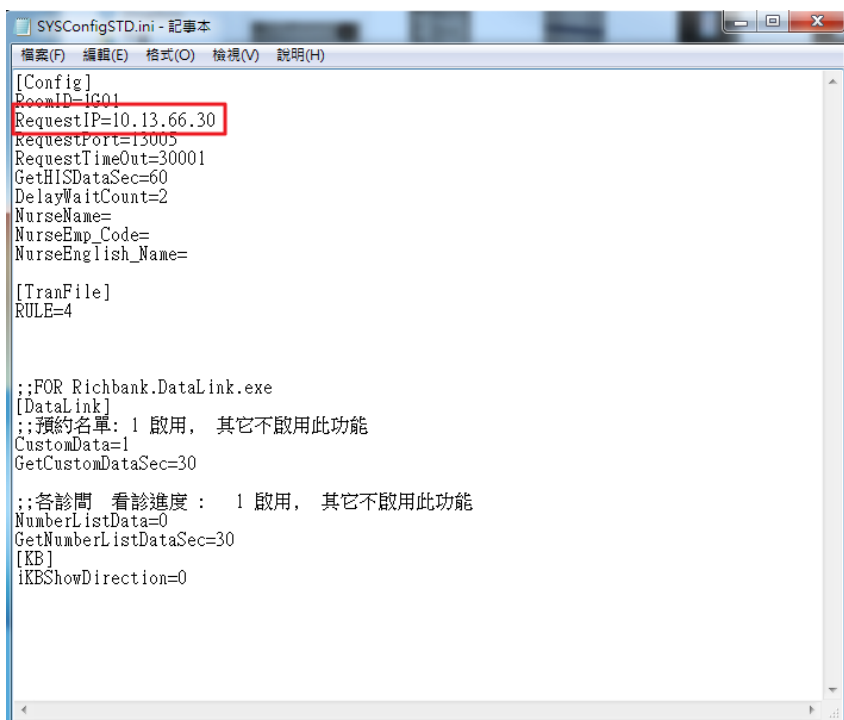

四、其他設定:

4-1. 讀卡機鎖定設定:

自動彈跳出鎖定讀卡機程式 CardConfig.exe



4-2. 下拉選擇框體的卡機型號(CASTLES EZ100PU 0)




4-3. 按下確定，即可設定完成



4-4. 移除啟動中→呼叫號碼顯示 12D 程式(預放程式跳過下圖設定)



4-5. 點選桌面右下角工具列中的喇叭→點選滑鼠鍵→再點選音效→將音效配置設定為無音效

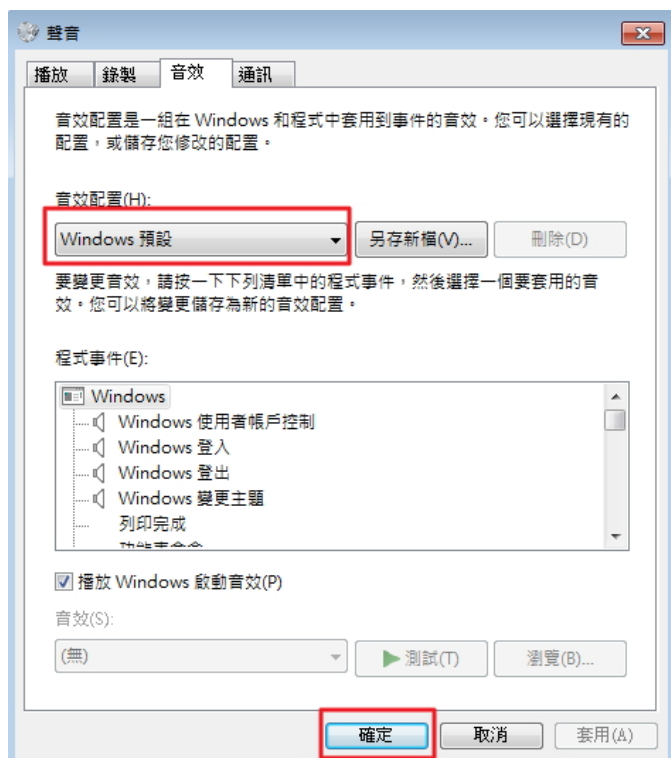

4-7. 點選開始→控制台→電源選項



4-8. 點選變更計畫設定→將所有選項選成都選無




五、DS2 派送派送方式如下：

5-1 自動跳出 ds2 網址→ 進入 DS2 的登入頁面，【帳號:admin，密碼:1234】




7-1. 相容性設定:

7-2-1. 點選工具「相容性檢視設定」方式來進行瀏覽，只需設定一次。

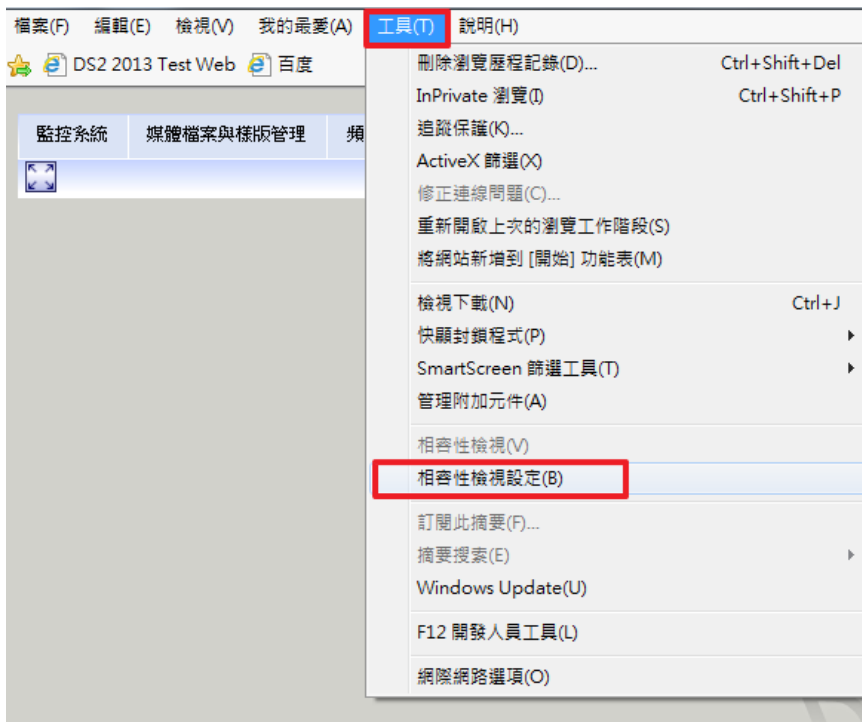


7-2-2. 確認 IP 無誤後點選新增，再點選關閉

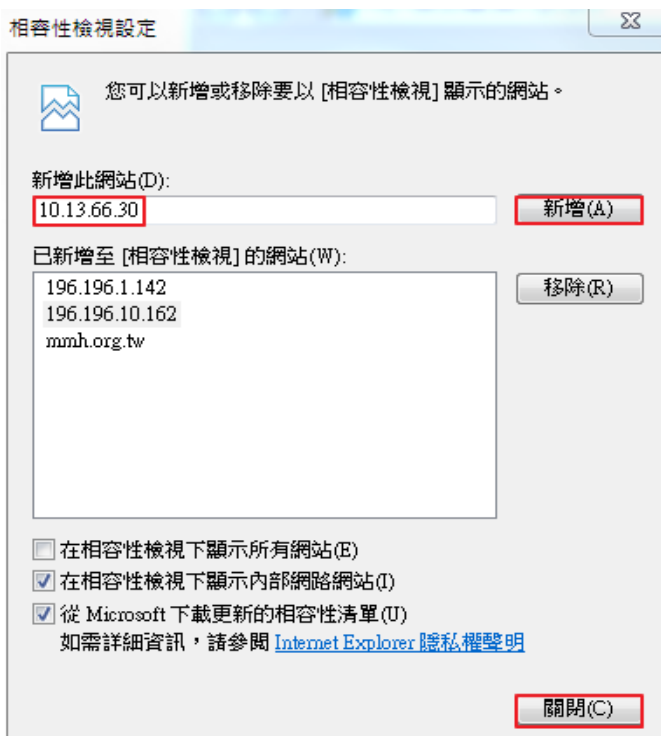

7-3- 新增播放設備：

7-3-1. 點選單位及設備管理→播放機資料管理

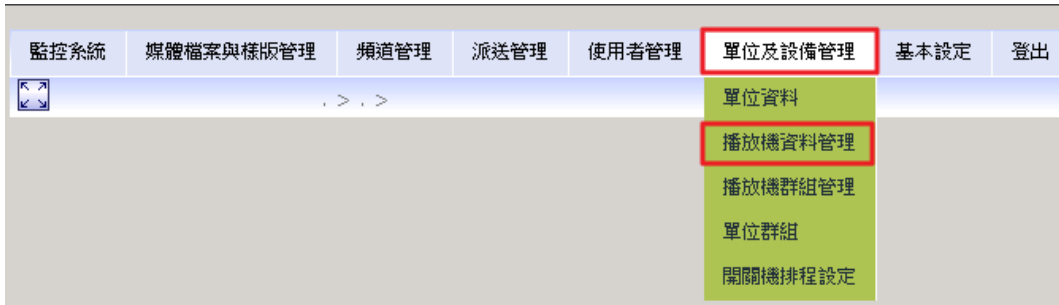

7-3-2. 點擊→新增

F. 單位及設備管理 > F.1. 單位資料 > 目前版本為 V1.0

新增 編輯 刪除

	單位名稱	地址	描述	上層單位
	行政部	新北市中和區中正路959號10樓	行政部	管理部
	客服部	新北市中和區中正路959號10樓	客服部台北總部	管理部
	客服部台中分部	台中市北區漢陽西街24號	客服部台中分部	客服部
	客服部高雄分部	高雄市左營區榮總路183巷22號12樓之1	客服部高雄分部	客服部
選取	Head Office			
選取	財務部	新北市中和區中正路959號10樓	財務部	管理部
選取	管理部	新北市中和區中正路959號10樓	總管理單位	
選取	研發部	新北市中和區中正路959號10樓	研發部台北總部	管理部
選取	研發部高雄分部	高雄市左營區榮總路183巷22號12樓之1	研發部高雄分部	研發部
選取	兆銀大陸分公司	廈門市思明區原禾路879号美新广场811室	兆銀大陸分公司	

目前頁數:1 / 總頁數:2 / 總筆數:11 第一頁 / 上一頁 / 下一頁 / 最後頁

7-3-3. 設定參數:

播放機基本資料填寫

*播放機編號: PC142

*IP位址: 196.196.1.142 : 8085 取得基本資料

*虛擬IP: 196.196.1.142

*裝設地點: 研發部測試間

MAC: 00-01-80-7C-64-DC

電腦名稱: OEM-2TNMFW3J2E3

型號: DE7000

廠牌: AOPEN

*所屬群組: 研發部測試 作業單位 客服部測試 大廳招待處 客服部 大陸分公司

*所屬單位: RD 研發部

(a). 輸入診間電腦 IP

(b). 點選取得基本資料

(c). 虛擬 IP 設定為診間電腦 IP


(d). 裝設地點設定診間名稱

(e). 會自動帶出資料

(f). 點選確定

7-4. 播放排程管理

7-4-1. 點選派送管理→播放排程管理

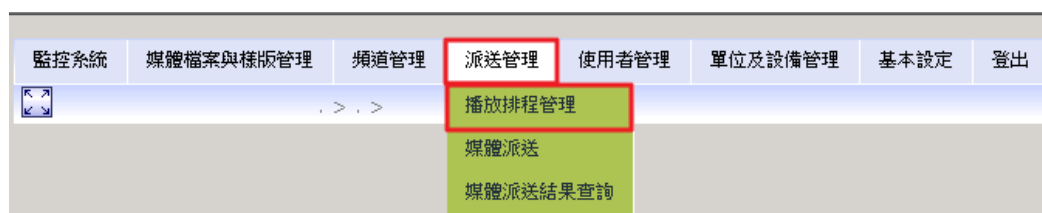

7-4-2. 勾選所欲設定排程的播放設備

第一步：選擇播放機 - 第二步：選擇排程 - 第三步：顯示編輯結果

<input type="checkbox"/>	播放機編號	IP位址	裝設地點	
<input type="checkbox"/>	PC12	196.196.1.12	研發部測試間	測試排程
<input type="checkbox"/>	PC140	196.196.1.140	研發部測試間	
<input checked="" type="checkbox"/>	PC142	196.196.1.142	研發部測試間	測試排程
<input type="checkbox"/>			研發部測試間	
<input type="checkbox"/>			大廳招待所	
<input type="checkbox"/>	VR002	100.100.1.2	大廳招待所	
<input type="checkbox"/>	VR003	100.100.1.3	行政辦公室	
<input type="checkbox"/>	VR004	100.100.1.4	客服測試組	
<input type="checkbox"/>	VR005	100.100.1.5	客服測試組	
<input type="checkbox"/>	VR006	100.100.1.6	客服測試組	
<input type="checkbox"/>	VR007	100.100.1.7	客服維修處	
<input type="checkbox"/>	VR008	100.100.1.8	客服辦公室	

1. 點選此間診間

2. 點選下一步

7-4-3. 選取診間排程

第一步：選擇播放機 - 第二步：選擇排程 - 第三步：顯示編輯結果

	排程名稱
選取	測試排程
選取	Clinc
選取	wait

1. 選取診間排程

2. 點擊【確定】

← 上一步 確定

7-4-4. 頻道排程設定成功

第一步：選擇播放機 - 第二步：選擇排程 - 第三步：顯示編輯結果

播放機編號	IP位址	裝設地點	排程名稱
PC140	196.196.1.140	研發部測試間	測試排程

2. 彈出視窗，點擊【確定】

Windows Internet Explorer
設定成功
確定

1. 設定成功

3. 點擊【繼續】

繼續

7-5. 媒體派送:

7-5-1. 點選派送管理→媒體派送

監控系統 媒體檔案與樣版管理 頻道管理 派送管理 使用者管理 單位及設備管理 基本設定 登出

播放排程管理
媒體派送
媒體派送結果查詢

7-5-2. 點擊【發佈新版本】

第一步：建立新版本或版本重新發佈 - 第二步：版本選擇 - 第三步：選擇播放機 - 第四步：選擇派送時間 - 第五步：發送結果回報

New
發佈新版本
Publish New Version

7-5-3. 勾選所欲派送的診間(確認電腦名稱及 ip 是否為安裝的診間)

第一步：建立新版本或版本重新發佈 - 第二步：版本選擇 - 第三步：選擇播放機 - 第四步：選擇派送時間 - 第五步：發送結果回報

新版本編號	編輯時間	發佈者
20121220152605	2012-12-20 15:26:05	Usr000

播放群組 研發部測試

<input type="checkbox"/>	播放機編號	IP地址	PORT	虛擬IP	MAC	裝設地點	開關機狀態	MEMO
<input type="checkbox"/>	PC12	196.196.1.12	8085	196.196.1.12	90-2B-34-02-21-66	研發部測試間	<input checked="" type="radio"/> ON	
<input type="checkbox"/>	PC140	196.196.1.140	8085	196.196.1.140		研發部測試間	<input type="radio"/> OFF	
<input type="checkbox"/>	PC142	196.196.1.142	8085	196.196.1.142	00-01-80-7C-64-DC	研發部測試間	<input checked="" type="radio"/> ON	
<input type="checkbox"/>	157	196.196.1.157	8085	196.196.1.157		研發部測試間	<input type="radio"/> OFF	NO SCHEDULE

1. 勾選播欲派送的診間

2. 點選【下一步】

← 上一步 下一步 →

7-5-4. 派送完成



7-5-5. MEMO 欄位：播放設備必須要設定頻道排程後才可以執行派送，MEMO 欄位會提醒使用者播放設備是否有設定頻道排程。

播放機編號	IP地址	PORT	虛擬IP	MAC	裝設地點	開關機狀態	MEMO
<input type="checkbox"/> PC12	196.196.1.12	8085	196.196.1.12	90-28-34-02-21-66	研發部測試間	<input checked="" type="checkbox"/> ON	
<input type="checkbox"/> PC140	196.196.1.140	8085	196.196.1.140		研發部測試間	<input type="checkbox"/> OFF	
<input type="checkbox"/> PC142	196.196.1.142	8085	196.196.1.142	00-01-80-7C-64-DC	研發部測試間	<input checked="" type="checkbox"/> ON	
<input type="checkbox"/> PC157	196.196.1.157	8085	196.196.1.157		研發部測試間	<input type="checkbox"/> OFF	NO SCHEDULE

7-5-6. 完成派送

PS: 切記設定完成後一定要將電腦重開機才會生效


8. 總測試:(測試前須重新開機)

8-1. 版面測試:開機後,開診完確認框體是否顯示正常畫面出現(無安裝框體不做此項測試)



8-2. 卡機測試:插入健保卡測試有無反應(會叫報到失敗即為正常)(無安裝框體不做此項設定測試)

8-3. 開診測試:點選開診設定中診間代號午別後,是否會帶出科別代碼及科別名稱和醫師代號及中英文姓名

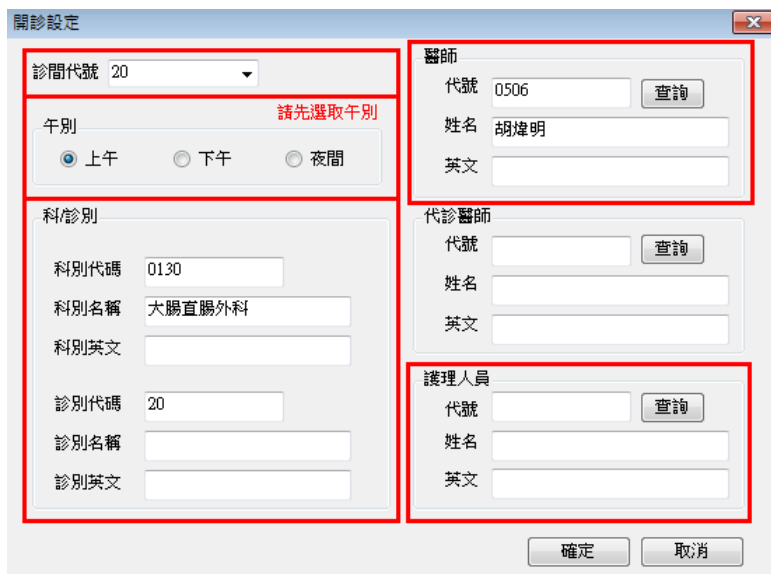

8-4. 診間叫號程式測試:

點選七大功能選項，如點選叫號後，確認框體上是否會顯示號碼以及出現叫號聲音

一般叫號 位置靠左 不停駐

資訊
診間:1381
日期:20120222,午別:1
科別:1381,診別:1381
醫師:高郁勛,護理:

正常號碼: 27 特殊號碼: 7

鍵盤叫號 看診名單 重叫號 叫號
關閉程式 開診設定 追蹤

已報到未叫號 >>

號碼	姓名	報到時間
8	陳賴粉	12:35:32
22	倪金榮	12:39:08
6	CHAKKRIT PHA...	12:42:37

更新畫面 選取叫號

8-5. 看診名單資料測試:點選看診名單確認是否有看診名單出現並點選叫號隨意點選

提示文字確認框體上有出現在右邊特殊號碼位置上

看診名單

資料篩選: 全部資料 已報到未叫號 追蹤號碼

資料排序: 看診順序 看診號碼 報到時間

號碼	病患姓名	身分證號	病歷號碼	叫號時間	報到時間	順序	報到狀態	看診狀態
14	楊澄亮	E125540500	04824626	12:38:44		0.00		已看診
21	黃美莉	S220283389	00067586	12:38:45	12:36:42	0.00	已報到	未看診
23	林慶和	S120288604	01875359	12:38:50	12:36:24	0.00	已報到	未看診
24	李順成	T102753887	05520721	12:41:31	12:39:13	0.00	追蹤暫存	未看診
26	曹森田	S100437816	00831800	12:41:35	12:39:22	0.00	追蹤暫存	已看診
27	羅芯梅	H200491896	04756260	12:41:39	12:39:18	0.00	追蹤暫存	未看診
7	邱永安	T100620312	00529613	12:41:43	12:35:17	0.00	追蹤暫存	已看診
6	CHAKK...	RC00586833	03211175	12:45:01	12:42:37	0.00	過號	已看診
28	張丁林	S102303206	00980052	13:20:38		0.00		已看診
29	林冠霖	E125522593	05226331	13:24:37		0.00		已看診
8	陳賴粉	E202093939	05346200	13:24:46	13:30:11	0.00	檢後報到	未看診
22	倪金榮	E102403568	03856686		12:39:08	29.20	過號	未看診

更新畫面資料 設為已報到 設為未報到 叫號 取消追蹤 加入排號 離開

資訊: 總數=15, 等待人數=1, 已叫號=14, 未叫號=1

8-6. 公告訊息測試:點選桌面公告訊息並任意新增一筆，看框體上是否會播放此公告訊息。(無安裝框體不做此項測試)



8-1~8-6 項目如測試皆正常即完成此診間安裝流程，即可再安裝下一診間。